

dental **Express**

ortho **Express**

## Anleitung – easyTI – KIM einrichten

(KIM-Adresse der Praxis eintragen)




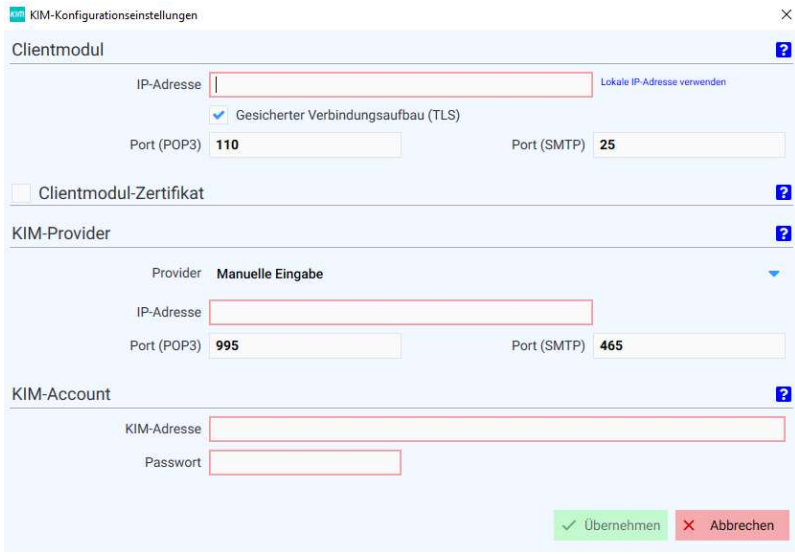

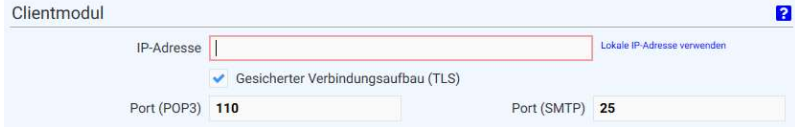
# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>2</b>
<b>easyTI - KIM - einrichten</b>	<b>3</b>
1. So führen Sie die easyTI KIM-Einrichtung aus	3
2. Muster eines KIM-Installationsprotokoll von Visionmaxx	9
3. So rufen Sie unter Thunderbird die Einstellungen für Ihre KIM-Adresse auf	9

## 1. So führen Sie die easyTI KIM-Einrichtung aus

	Checkliste für die easyTI KIM-Einrichtung	Erledigt?
1.	<p>Öffnen Sie an einem beliebigen Arbeitsplatz das Express-Programm.</p> <p>In der Programmauswahl klicken Sie auf  Tools  und anschließend auf die Funktion  easyTI KIM einrichten :</p>  <p>Erscheint anschließend einen Mandanten-Auswahl, wählen Sie bitte den Mandanten an, für den Sie die KIM-Adresse hinterlegen möchten.</p> <p>Bei Praxen mit nur einem Mandanten erscheint die Auswahl nicht.</p> <p>Das Programm prüft die Anbindung zu easyTI. Dieser Vorgang kann 1-2 Minuten Zeit in Anspruch nehmen.</p>	<input type="checkbox"/>
2.	<p>Konnte keine Verbindung aufgebaut werden, erhalten Sie am Bildschirm eine entsprechende Fehlermeldung. Wechseln Sie in diesem Fall zu einem anderen Arbeitsplatz und wiederholen Sie den Punkt 1.</p> <p>Konnte keine Verbindung aufgebaut werden, prüfen Sie anhand der Anleitung „easyTI-Konfiguration.PDF“, ob easyTI eingerichtet ist.</p>	<input type="checkbox"/>
3.	Ist die Verbindung zu easyTI erfolgreich, erhalten Sie folgende Anzeige:	<input type="checkbox"/>

	Checkliste für die easyTI KIM-Einrichtung	Erledigt?
		
4.	<p>Die oben gezeigten Felder müssen Schritt für Schritt von Ihnen gefüllt werden.</p> <p>Wie die Felder gefüllt werden müssen, wird ab Punkt 5 beschrieben und zusätzlich erhalten Sie am Bildschirm auch Unterstützung, wenn Sie in der entsprechenden Rubrik auf die Hilfefunktion  klicken.</p> <p>Um die Felder auszufüllen, benötigen Sie außerdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Installationsunterlagen des KIM-Clientmoduls, die Sie von Ihrem DVO erhalten haben.</li> <li>- Sollte Ihre KIM-Adresse bereits in einem E-Mail-Programm eingerichtet sein, können Sie auch die dort hinterlegten Einstellungsdaten nutzen.</li> </ul> <p>Nachfolgend werden die auszufüllenden Felder erläutert. Wir beziehen uns hier oft auf das Beispiel „Visionmaxx“, da hier bekannt ist, dass Visionmaxx das Installationsprotokoll auf dem Desktop abgelegt hat und dass parallel dazu die KIM-Adresse bereits über das E-Mail-Programm Thunderbird eingerichtet wurde.</p>	<input type="checkbox"/>
5.	<p><b>Clientmodul</b></p>  <p><b>Feld IP-Adresse</b> Im Feld  IP-Adresse  müssen Sie die IP-Adresse oder den Netzwerknamen (Host)</p>	<input type="checkbox"/>

Checkliste für die easyTI KIM-Einrichtung	Erledigt?
<p>eingeben, auf dem das KIM-Clientmodul installiert wurde.</p> <p>Das KIM-Clientmodul wurde von Ihrem DVO eingerichtet.</p> <p>Wurde das KIM-Clientmodul an dem Arbeitsplatz eingerichtet, an dem Sie jetzt auch die easyTI KIM-Einrichtung durchführen, nutzen Sie den oben angezeigten Link <a href="#">Lokale IP-Adresse verwenden</a>, um das Feld zu füllen.</p> <p>Befindet sich das KIM-Clientmodul auf einem anderen Arbeitsplatz, finden Visionmaxx-Kunden die Angaben über das KIM-Installationsprotokoll. Die IP-Adresse steht dort im Feld  KIM-HOST IP-Adresse .</p> <p>Sollte diese IP-Adresse nicht funktionieren, übernehmen Sie bitte die IP-Adresse aus den Thunderbird-Einstellungen (siehe Kapitel 2.6 und die Hilfe-Funktion <a href="#">?</a>).</p> <p>Nutzer anderer Provider fragen bitte bei Ihrem DVO, der das KIM-Clientmodul eingerichtet hat, nach der IP-Adresse Ihres KIM-Clientmoduls und nach den nachfolgenden Daten.</p> <p><b>Gesicherter Verbindungsaufbau (TLS)</b></p> <p>Sind das KIM-Clientmodul und easyTI an unterschiedlichen Arbeitsplätzen eingerichtet, soll die Funktion  Gesicherter Verbindungsaufbau (TLS)  laut der gematik aktiv sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer des Providers Visionmaxx: Welche Einstellung in Ihrer Praxis erforderlich sind, können Sie den Thunderbird Einstellungen entnehmen.</li> </ul> <p>Nutzen Sie hierzu bitte auch die Erläuterungen aus der Hilfe-Funktion <a href="#">?</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andere Provider: Prüfen Sie bitte, ob Ihnen Unterlagen von der Installation des KIM-Clientmoduls vorliegen, die die erforderlichen Angaben enthalten.</li> </ul> <p>Liegen Ihnen keine Unterlagen vor, wenden Sie sich bitte an Ihren DVO, der das KIM-Clientmodul eingerichtet hat.</p> <p><b>Port (POP3)</b></p> <p>Geben Sie hier die Port-Nummer ein, über die die KIM-Mails aus dem KIM-Clientmodul empfangen werden.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>

	Checkliste für die easyTI KIM-Einrichtung	Erledigt?
	<p><b>Port (SMTP)</b> Geben Sie hier die Port-Nummer ein, über die die KIM-Mails an das KIM-Clientmodul versendet werden.</p> <p>- Tipp für Nutzer des Providers Visionmaxx: Welche Einstellungen in Ihrer Praxis erforderlich sind, können Sie den Thunderbird Einstellungen entnehmen.</p> <p>Nutzen Sie hierzu bitte auch die Erläuterungen aus der Hilfe-Funktion <a href="#">?</a>.</p> <p>- Hinweis für andere Provider: Prüfen Sie bitte, ob Ihnen Unterlagen von der Installation des KIM-Clientmoduls vorliegen, die die erforderlichen Angaben enthalten.</p> <p>Liegen Ihnen keine Unterlagen vor, wenden Sie sich bitte an Ihren DVO, der das KIM-Clientmodul eingerichtet hat.</p>	<input type="checkbox"/>
6.	<p><b>Clientmodul-Zertifikat</b></p> <p><input type="checkbox"/> Clientmodul-Zertifikat</p> <p>Ist bei  Gesicherter Verbindungsaufbau (TLS)  das Häkchen gesetzt, müssen Sie evtl. ein KIM-Clientmodul-Zertifikat importieren.</p> <p>Visionmaxx-Kunden benötigen dieses Zertifikat in der Regel nicht.</p> <p>Für weitere Erläuterungen nutzen Sie bitte die Hilfe-Funktion <a href="#">?</a>.</p>	<input type="checkbox"/>
7.	<p><b>KIM-Provider</b></p> <div data-bbox="261 1406 1056 1568" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>KIM-Provider <a href="#">?</a></p> <p>Provider <b>Manuelle Eingabe</b> <span style="float: right;">▼</span></p> <p>IP-Adresse <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Port (POP3) <input style="width: 80px;" type="text" value="995"/> Port (SMTP) <input style="width: 80px;" type="text" value="465"/></p> </div> <p><b>Provider</b> Sie können hier zwischen  Manuelle Eingabe  und bekannter KIM Provider auswählen:</p> <div data-bbox="261 1738 679 2020" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Manuelle Eingabe</p> <p><b>Arvato Systems perdata GmbH (VisionmaxX)</b></p> <p>akquinet Health Service GmbH</p> <p>Compugroup Medical Deutschland AG</p> <p>IBM Deutschland GmbH</p> <p>T-Systems International GmbH</p> </div>	



Checkliste für die easyTI KIM-Einrichtung	Erledigt?
<div data-bbox="258 230 1056 772"> </div> <p data-bbox="258 824 1104 855">Klicken Sie auf  Übernehmen , um die KIM-Einrichtung abzuschließen.</p> <p data-bbox="258 907 1241 1019">Das Programm prüft Ihre Eingaben und sendet eine Testmail an Ihre KIM-Adresse. Ist die Prüfung abgeschlossen, erscheint eine Anzeige, ob die Einrichtung erfolgreich war:</p> <div data-bbox="258 1070 1056 1326"> </div> <p data-bbox="258 1377 1125 1408">Die Einrichtung war erfolgreich, wenn der Button  OK  ein Häkchen hat:</p> <div data-bbox="258 1456 379 1518"> </div> <p data-bbox="258 1570 1136 1641">War die Einrichtung nicht erfolgreich, fehlt das Häkchen und es wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.</p> <p data-bbox="258 1693 1225 1765">Über  Zurück  können Sie wieder in das Konfigurationsfenster wechseln und die Eingaben entsprechend ergänzen.</p> <p data-bbox="258 1816 1189 1888">Benötigen Sie Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren DVO. Dieser kann Ihnen die entsprechenden Angaben zu Ihrem KIM-Clientmodul nennen</p>	<div data-bbox="1321 907 1348 936" style="text-align: center;">□</div> <div data-bbox="1321 1541 1348 1570" style="text-align: center;">□</div>



## 2. Muster eines KIM-Installationsprotokoll von Visionmaxx

### KIM-Installationsprotokoll

#### Stammdaten

Kundennummer	1234
Kundenname	Dr. Max Mustermann
E-Mail:	drmaxmustermann@gmail.com
Firebird-Version:	
Windows 7:	
KIM-E-Mail #1:	drmaxmustermann@vm.kim.telematik
KIM-E-Mail #2:	
KIM-E-Mail #3:	
KIM-E-Mail #4:	
KIM-E-Mail #5:	
KIM-CID:	1234567890123456
KIM-Host IP-Adresse:	192.168.2.10

#### Zertifikate und Passwörter

Zertifikatsnummer:	54321
Passwort Zertifikat:	1Test2\$A#0
KIM-Passwort:	!1234Test

#### Status

Installationsdatum:	24.12.2021
Installations-Status:	Erfolgreich
Anmerkungen:	
Anzahl installierter KIM-Arbeitsplätze:	1

## 3. So rufen Sie unter Thunderbird die Einstellungen für Ihre KIM-Adresse auf

- Öffnen Sie das E-Mail-Programm Thunderbird.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre KIM-Adresse.
- Unter |Server-Einstellungen| finden Sie alle erforderlichen Angaben für den Posteingang.
- Für den Postausgang erhalten Sie unter |Postausgangs-Server (SMTP)| die erforderlichen Informationen.

**Geschäftsführer**

Hans Georg Schilling  
Registergericht Pinneberg HRB 1529 EL  
Steuernummer: 18 / 294 / 06653  
Ust.-Id.-Nr. DE 134 847 405

**Telefon / Fax / Internet**

Fon: +49 - (0) - 4121 - 2380  
Fax: +49 - (0) - 4121 - 20336  
[www.dental-vision.de](http://www.dental-vision.de)  
[info@dental-vision.de](mailto:info@dental-vision.de)

**Bankverbindung**

VR Bank in Holstein eG  
IBAN DE44 2219 1405 0017 0830 90  
BIC GENODEF1PIN

